
## БЮРЕТКИ- "прямые" - "класс AS" - "сертификат соответствия"

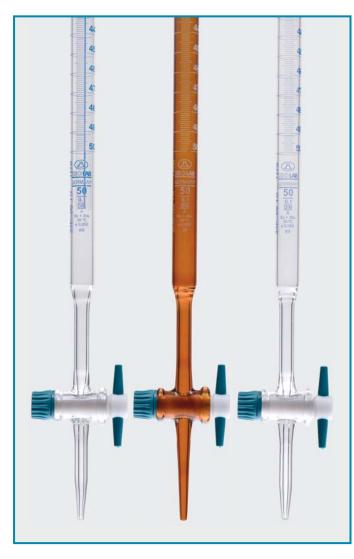

- ➤ Изготовлены из боросиликатного стекла 3,3 в соответствии со стандартами ISO 385.
- ➤ Калибровка в соответствии со стандартом DIN / ISO класса «А».
- Имеют знак соответствия («Н» / «DE-М») в соответствии с федеральными нормами федерального веса и мер безопасности Германии.
- Индивидуальная калибровка, выполняемая автоматическими роботами, исключает возможные отклонения от номинальных значений.
- Знак соответствия и номер партии напечатан на поверхности корпуса. Сертификат партии можно загрузить с веб-сайта.
- ➤ Поставляется со сменным краном из тефлона (РТFЕ), который вообще не требует смазки. Кран гарантирует наилучший контроль капель. Идентичные краны не нуждаются в «совпадении пар» во время очистки.

## > Альтернатива

- > Прозрачные бюретки
- > Янтарные бюретки
- ➤ Надписи и номинальные значения на прозрачных бюретах печатаются синей эмалью.
- ▶ Надписи и номинальные значения на янтарных бюретах печатаются белой эмалью.
- 2 типа прозрачныхБез полосы ШелбахабюретокС полосой Шелбаха
- > Полоса Шелбаха с узкой синей полосой, которая находится в центре большей белой полосы, предлагает более легкое и точное наблюдение линии мениска.

прозрачные бюретки <sup>без полосы Шелбаха</sup>	прозрачные бюретки с полосой Шелбаха	янтарные бюретки без полосы Шелбаха	объем	кол-во в уп.	
017.02.010	017.01.010	018.01.010	10 мл	1 wm	
017.02.025	017.01.025	018.01.025	25 мл	1 wm	
017.02.050	017.01.050	018.01.050	50 мп	1 шт	

Поставляется со сменным краном из PTFE, который вообще не требует смазки.


Уникальная форма запорного крана гарантирует лучший контроль скапывания. Может быть закрыт осторожным поворотом. Обеспечивает герметичность закрытия.

Идентичные краны не нуждаются в «совпадении пар» во время очистки.


## особенности полосы Шелбаха

Для более легкого считывания полоса Шеллбаха печатается на задней стороне стенки бюретки. Нарисована узкой синей полосой, которая находится в центре большей белой полосы.


Легкая фракция создает две стрелки, которые появляются на уровне линии мениска. Точка считывания мениска - место встречи стрелок друг с другом.

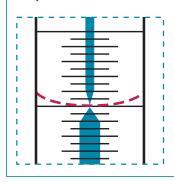



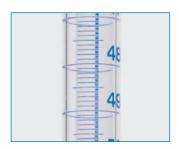

Все надписи бюретки и номинальные значения печатаются синей эмалью.

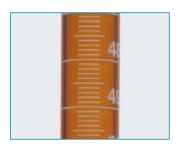

Все надписи и номинальные значения янтарной бюретки печатаются белой эмалью.